

3. krok – Spuštění přístroje (provoz režimů)

Tip: používejte od nejnižšího po nejvyšší stupeň intenzity.

① Zapněte přístroj; ujistěte se, že je celá hlavička přístroje v kontaktu s pokožkou a jemně s ní pohybujte. (Poznámka: při použití režimu RF nesmí hlavička přístroje setrvat na jednom místě na pokožce déle než 5 vteřin.) Režim RF, EMS, CV: upozorní po uplynutí 5 minut, automaticky se vypne po 15 minutách masáže.

② Čištění pleti: po masáži odstraňte nadbytečný přípravek. Obličej dočistěte ručníčkem nebo vodou.

Vyčistěte přístroj: hlavičku přímo umyjte, vysušte ji čistým hadříčkem nebo tkaninou.

③ La Beauté Secrète Luxusní multifunkční přístroj na péči o pleť použijte na masáž.

RF (radiofrekvenční) režim: používejte od nízkého po vysoký stupeň intenzity.

Používejte s přípravky: esence / emulze / gel

① Pohybujte od středu čela doleva a doprava.



③ Pohybujte od středu tváře k okrajům.



② Pohybujte od vnitřního koutku oka k vnějšímu.



④ Pohybujte po tváři zdola nahoru a zhora dolů.



EMS (mikroproudový) režim: používejte od nízkého po vysoký stupeň intenzity.

Používejte s přípravky: gel / emulze / krém lehké konzistence

① Tahejte po obou stranách úst zdola nahoru.



② Naneste na tvář kosmetický přípravek, dělejte jemné souvislé pohyby přístrojem.



CV (ultrazvukový) režim

Používejte s přípravky: emulze / krém (čistící režim s přípravkem na odstranění make-upu a vodou)

① Pohybujte od středu tváře k okrajům.



② Pohybujte po obou stranách nosu mírně do středu.



AUTO (kombinovaný) režim

RF + CV + červené světlo 7,5 minuty, následně EMS + modré světlo 7,5 minuty

① Pohybujte od středu po okraje krku. Na podporu mikrocirkulační masáže postupujte zhora dolů.



② Aplikujte plynulým pohybem od středu k okrajům a od okrajů k středu tváře.



③ Jemně masírujte podle výše popsanych kroků.

Automatické vypnutí;

Přístroj se vypne po 15 minutách od zapnutí.

Pokud chcete pokračovat, podržte tlačítko zapnutí/vypnutí.

Přístroj pipnutím při každém režimu upozorní na časový limit 5 minut.

Voděodolnost

- Tělo přístroje je voděodolné PX6, přístroj je možné umývat vodou, ujistěte se však, že je vypnutý.
- Stojan na nabíjení není voděodolný.
- Zahřátí přístroje během nabíjení je normálním jevem.

Parametry přístroje

Název přístroje: La Beauté Secrète Luxusní multifunkční přístroj na péči o pleť
Jmenovité napětí: 7,4V
Jmenovitý proud: 1000 mA
Výkon: 7,4W
Nabíjecí napětí: 9,0V
Nabíjecí proud: 1,0A
Způsob nabíjení: bezdrátové nabíjení
Doba nabíjení: < 6 hodin
Doba používání: Doporučuje se 15 minut (Přístroj se vypne po 15 minutách od zapnutí.)

* Přístroj pipnutím při každém režimu upozorní na časový limit 5 minut.

Doba používání: < 60 minut (pro jednu funkci)

Funkce:
RF-----1MHZ (5 stupňů)
EMS-----5 stupňů
CV-----5MHz
LED-----červené/modré

Další funkce: LCD displej

TQ-D27 La Beauté Secrète CILVARIS Luxusní multifunkční přístroj na péči o pleť NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Před použitím si důkladně přečtěte tento návod na používání a uchovejte ho pro použití v budoucnu.

Výzkum & Vývoj: Tianjin Tianshi Biological Engineering Co., Ltd.
Adresa: No.20 Xinyuan Road, Wuqing Development Area, Tianjin, China
Poštovní kód: 301700
www.tiens.com

Výrobce: Asia Pacific Perfect Technology Co., Ltd
Adresa: Floor 1 west, No. 13, Daxing Road 1st, Buyong Industrial area, Shajing Road, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province

Děkujeme, že používáte CILVARIS La Beauté Secrète, Luxusní multifunkční přístroj na péči o pleť.

Před použitím si důkladně přečtěte Návod na použití a uchovejte ho.

Název výrobku

CILVARIS La Beauté Secrète Luxusní multifunkční přístroj na péči o pleť
TQ-D27

Popis výrobku

Režim	Funkce a účinky
RF	RF + LED nano červené světlo
EMS	EMS + LED nano modré světlo
CV	CV ultrazvuk
RF	AUTO kombinovaný režim Nejprve RF+CV+červené světlo 7,5 min. Potom EMS+modré světlo 7,5 min.

Upozornění

- Stupeň intenzity zvyšujte postupně.
- V případě poruchy ihned přestaňte používat. Porucha přístroje může představovat nebezpečí a přinést opačný účinek.
- Nepoužívejte na poškozenou, zánětlivou, svrbící pokožku nebo v případě jiných abnormalit.
- Lidé po dentálním ošetření by měli postupovat opatrně a vyhnout se přímému kontaktu s ošetřovaným místem.
- Nepoužívejte přístroj v případě, že spadl nebo je jinak poškozený.
- Hlavu přístroje neutírejte alkoholem, ředidlem, benzínem ani odlakovačem. Tyto látky mohou poškodit povrch přístroje.
- Nepoužívejte dlouho na tom samém místě.
- Při používání zohledňujte stav pokožky.
- Není vhodný pro lidi s kontaktní alergickou dermatitidou, kožními nemocemi, pro těhotné ženy, ženy během menstruace, lidi, kteří mají paralyzované senzorické vnímání, lidi s nemocemi kostí a podobně.
- Přístroj a nabíjecí základnu udržujte suché.
- Přístroj není určený na používání osobami s omezenou mobilitou, s nedostatkem energie nebo nezkušenými osobami včetně dětí, bez dozoru a zajištění bezpečnosti.
- Spojení elektřiny a vody představuje nebezpečí, proto přístroj nenabíjete ve vlhkém prostředí, například v koupelně nebo u bazénu.
- Přístroj používejte společně s kosmetickým sérem/krémem.
- Nevhodný pro děti do 14 let.

Výstraha

* * * * Nepoužívejte přístroj v následujících případech, které mohou vést k jeho poškození:


- Pokud je osoba napojená na umělé plíce nebo jiné přístroje
- Strojek na srdce
- Elektrokardiogram a jiná přenosná zařízení
- Kovové implantáty

* * * * Abyste předešli nehodě nebo úrazu, vyhněte se následujícím částem těla:

- Nad strojkem na zuby
- Zónám po kosmetickém zákroku
- Víčkům, očím a oblastí v těsné blízkosti očí
- Rankám a škrabancům
- Při infekčních a jiných nemocech použití konzultujte s lékařem

Součásti přístroje

- 1 Součást hlavičky s technologií RF / Součást hlavičky vybavená technologií EMS
- 2 CV ultrazvuková součást hlavičky
- 3 Led nano červené / modré světlo
- 4 Led displej
- 5 Tlačítko potvrzení funkce / ovládání intenzity
- 6 Zapnutí/vypnutí/přepínání funkcí
- 7 Konzole na bezdrátové nabíjení

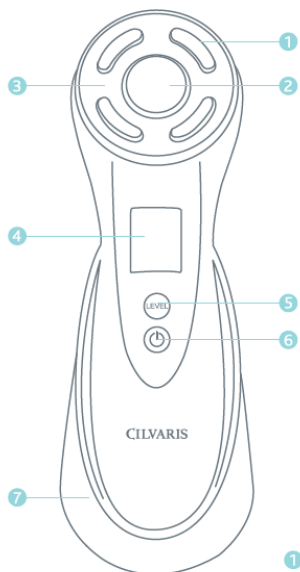

Funkce

Displej	Režim/stupeň intenzity (Stupeň intenzity přizpůsobte podle vlastního pocitu)					
RF	RF Vypnuté	RF stupeň 1	RF stupeň 2	RF stupeň 3	RF stupeň 4	RF stupeň 5
EMS	EMS Vypnuté	EMS stupeň 1	EMS stupeň 2	EMS stupeň 3	EMS stupeň 4	EMS stupeň 5
CV	CV Vypnuté	CV-ON Zapnuté				
AUTO	AUTO-OFF Vypnuté	AUTO-ON Zapnuté				

	1. Pro zapnutí podržte 2 sekundy, pro vypnutí podržte 2 sekundy.
	2. Když bliká "RF", stlačte a postupným stlačováním přecházejte mezi režimy EMS, CV, AUTO.
	3. Když bliká "RF", jedním stlačením potvrďte tuto funkci.
	4. Po potvrzení funkce, jedním stlačením nastavte stupeň 1, dvěma stlačením nastavte stupeň 2, třemi stlačením nastavte stupeň 3, čtyřmi stlačením nastavte stupeň 4 a pěti stlačením nastavte stupeň 5.

Používání přístroje

Nabíjení (Před použitím se ujistěte, že je přístroj dostatečně nabitý.)

1. Položte přístroj na konzoli; zapnutím do sítě se spustí nabíjení. Plné nabití trvá přibližně 6 hodin.
2. Poprvé se doporučuje nabíjet 6 hodin. Přístroj má zabudovanou inteligentní bezpečnostní kontrolku, proto se během nabíjení nedá zapnout a používat.

1. krok – Čištění

Odstraňte make-up a vyčistěte pleť čistícím přípravkem nebo použijte na čištění tváře režim CV. Podle následujících kroků připevněte vatový tampon a použijte přípravek na odstranění make-upu.



- Prstenec na fixaci vatového tamponu
- Vatový tampon
- Hlavičky přístroje
- Hlavičky s tamponem

Režim CV Ultrazvukového čištění

- 1 Instalujte na hlavičku vatový tampon a zafixujte ho prstencem.
- 2 Navlhčete bavlněný tampon přípravkem na odstranění make-upu a ujistěte se, že celý tampon je důkladně mokrý.
- 3 Zapněte přístroj a zvolte režim CV.
- 4 Přístroj přiložte na pleť tak, aby se jí dotýkal celou hlavičkou. Pohybujte po pokožce obličeje podle kroků 1 – 6 na následujícím obrázku. Pokud tampon během masáže vyschne, přístroj se bude těžko pohybovat po pokožce, proto je potřeba opětovně ho navlhčit přípravkem na odstranění make-upu.
- 5 Po vyčištění odstraňte fixační prstenec a vatový tampon. Hlavičku přístroje utřete čistým hadříčkem nebo tkaninou a přejděte k dalšímu kroku.



2. krok – nanesení krému, séra atd.

Vyberte si vhodný kosmetický přípravek podle zvoleného režimu a typu pleti.

č.	Režim	Funkce	Příklady použití přípravků
1	EMS AUS	RF + LED nano červené světlo	esence / emulze / gel
2	EMS	EMS + LED nano modré světlo	gel / emulze / krém lehké konzistence / maska
3	CV	CV ultrazvuk	emulze / krém (režim čištění s přípravkem na odstranění make-upu)
4	AUTO	RF+CV+ červené světlo 7,5 minuty EMS+ modré světlo 7,5 minuty	přípravky s lehkou konzistencí, masky a pod.

Poznámka: Protože každá pleť je odlišná, výše uvedená tabulka slouží jen jako příklad použití. Nepředstavuje pevně stanovené schéma.